

Stellaris *ACTIVATE*™

Необхідна вам стабільність камери



BAUSCH + LOMB
See better. Live better.

StellarisActivate™ надає вас необхідну стабільність камери. Тільки Stellaris Activate™ надає вам засновані на вакуумній технології струменеві системи StableChamber® з опцією налаштування інфузії під тиском DigiFlow®.

Stellaris Activate™ - Розроблено для підвищення контролю. Stellaris Activate™ - це хірургічні факосистеми наступного покоління, розроблені для об'єднання ваших хірургічних технік. Незалежно від того, здійснюєте ви стандартну операцію з видалення катаракти або бімануальну хірургію катаракти з використанням мікронадрізів (БХКМ), Stellaris Activate™ забезпечить вам ту ефективність, яка вам необхідна, і тоді, коли вона необхідна. Вакуумне управління Stellaris Activate™ забезпечує стабільність камери. Стабільність камери додатково поліпшується за допомогою інфузії під тиском DigiFlow®, яка переводить операції з видалення катаракти на наступний рівень.

- Струменеві системи StableChamber® Stellaris Activate™ розроблені для оптимізації стабільності камери, завдяки наступним 4 компонентам:
1. Чутливі струменеві системи і інфузія під тиском DigiFlow® доведено підвищують стабільність камери у 76% процедур¹
 2. Трубки VFM StableChamber® розроблені для управління і стабілізації потоку у високовакуумних процедурах БХКМ.
 3. Передове апаратне забезпечення розроблене для удосконалення контролю з вашого боку
 4. Програмне забезпечення, що передбачає налаштування користувача, підвищує ефективність

76% хірургів відзначили підвищену стабільність камери з системою DigiFlow® у порівнянні з самопливними системами¹.

Stellaris
ACTIVATE™




- Чіткий контроль струменевих систем, завдяки інфузії під тиском DigiFlow®
- 76% хірургів відзначили підвищену стабільність камери з системою DigiFlow®¹
 - Кращий контроль процесу інфузії – мінімізація коливань тиску всередині ока (ТОВ)
 - Проста крива дослідження використання




Чіткий контроль струменевих систем, завдяки трубкам StableChamber®

Трубки StableChamber® мінімізують коливання

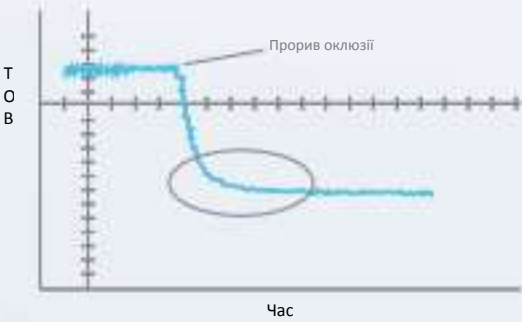

Мінімальні коливання або їх відсутність після прориву оклюзії¹

Оптимізація стабільності камери, благодаря трубкам StableChamber®

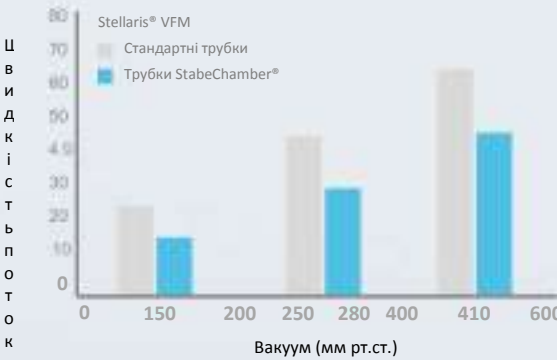

Трубки StableChamber® дозволяють вам підвищувати вакуум, одночасно мінімізуючи потік, що підвищує рівень утримання¹

Запатентовані трубки StableChamber® і система інфузії під тиском DigiFlow® додають новий рівень контролю потоку, забезпечуючи безпечне використання більш високих налаштувань вакууму.

(1) Неопубліковані дані

(1) Неопубліковані дані

Інноваційний дизайн педального перемикача Для унікального управління системою



Готові максимізувати свій контроль?

Перший у своєму роді інтуїтивно зрозумілий бездротовий, програмований педальний перемикач оснащений функцією унікального контролю Dual Linear, яка дозволяє вам модулювати кілька параметрів всього одним натисканням педалі. Лінійний контроль потужності і аспірації забезпечують вам контроль середовища всередині ока. Використовуйте правильну кількість аспірації і факопотужності для видалення лінз максимально ефективним способом – тільки завдяки Stellaris Activate™.



Крок забезпечує традиційний контроль

1. Іригації
2. Аспірації / вакууму
3. Ультразвуку

Бездротова, дволінійна технологія, об'єднана з точним контролем струменевих систем і ультразвуком, розширює ваші можливості і покращує удерживаемість рівень утримання

- Інтегроване, але незалежне управління факоенергією і аспірацією
- Розроблено для забезпечення більшої точності при роботі з ендотелієм рогівки, слабкими зв'язками, маленькими зіницями або дрібними камерами
- Чотири унікальних функціональних клавіші пропонують широкий діапазон опцій перемикачів між режимами і хірургічного програмування



Додавання функції повороту підвищує хірургічний контроль

Отримайте одночасний контроль ультразвуку і аспірації завдяки Dual Linear.


Перший у своєму роді інтуїтивно зрозумілий бездротовий, програмований педальний перемикач оснащений функцією унікального контролю Dual Linear.

Stellaris
ACTIVATE™

Навіщо подавати більше, ніж вам потрібно, енергії? Досягайте кращих результатів, не змінюючи свій підхід

Ефективне різання з мінімальною енергією – фундаментальна мета факоемульсифікації. Мінімізація енергії, що подається на око, доведено покращує клінічні результати. Stellaris® має функції Управління необхідною енергією (AttuneEnergy Management), об'єднуючи ефективний ультразвук 28,5кГц з передовою модуляцією потужності, що дозволяє вам створювати дуже ефективний, низькоенергетичний режим модуляції без необхідності в кутових голках, спеціальних наконечниках або зміні методик.

Ефективність факоемульсифікації підвищується, завдяки наконечнику Stellaris® 28,5кГц. Енергія, що надходить в око, мінімізується, оскільки вона балансує механічне різання і акустичну кавітацію для ефективної емульсифікації і видалення ядра.

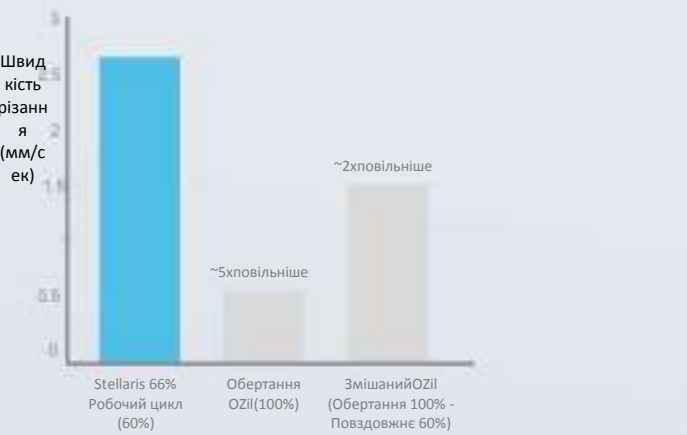

Порівняння різних зусиль різання².

(2) Шафер М.Є.: Аналіз зусиль різання при використанні різних модальностей факоемульсифікації. Представлено на Щорічних зборах Американського товариства катарактальної і рефракційної хірургії, Сан-Франциско, СА; квітень 2009 року

Stellaris Activate™ пропонує ще більше можливостей катарактальним хірургам

Stellaris Activate™ - ідеальний вибір для вашої практики. Лікарні та амбулаторні хірургічні центри переходять на Stellaris Activate™ тільки з цієї причини. Наявність найкращих струменевих систем і можливостей різання – важливо для всіх процедур, пов'язаних з катарактою.

- Оновлення Stellaris Activate™
- Новий дизайн педального перемикача і новий екран
- Контроль інфузії DigiFlow®
- Перенесення стандартних хірургічних файлів з Stellaris® на ПК Stellaris®
- Покращені призначені для користувача елементи управління на екрані і випадające меню
- Покращені функції обміну повідомленнями для чіткості і простоти використання



Stellaris
ACTIVATE™



Спробуйте катарактальної системи Stellaris® в наших європейських Центрах передових технологій

Висококласна ефективність чіткого контролю



Для отримання більш докладної інформації відвідайте наш сайт
www.choosestellaris.com

Для отримання більш докладної інформації про інструменти відвідайте сайт
www.storzeve.eu
або зв'яжіться з нами по електронній пошті: storz-instruments@bausch.com

Для отримання більш докладної інформації або для випробування цих технологій,
зв'яжіться з вашим представником компанії Bausch + Lomb



Stellaris
ACTIVATE™

EMEA_SU_BROCH_ACTIVATE
Stellaris Activate™ (вих. №BL11114).

®/™ - торгові марки компанії Bausch & Lomb або її афілійованих компаній.
© Bausch & Lomb Incorporated.

BAUSCH + LOMB
See better. Live better.